
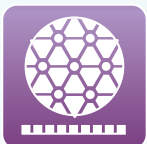

















Aka-Brief # 9 Fibra de Carbono

1						
	Rhaco Grit P320	Agua	300 rpm	25 N	Hasta planitud	BF, 50x
2						
	Largan 9	DiaMaxx Poly 9 μm	150 rpm	20 N	8:00 min	BF, 100x
3						
	Largan 9	DiaMaxx Poly 3 μm	150 rpm	20 N	8:00 min	BF, 350x
4						
	Darax	DiaMaxx Poly 3 μm	150 rpm	10 N	4:00 min	BF, 200x
5						
	Darax	DiaMaxx Poly 0.25 μm	150 rpm	10 N	2:00 min	BF, 500x

Se indican tiempos para un sistema de preparación de 300 mm. y una muestra individual de diámetro 40 mm.

En un sistema de 250 mm. los tiempos deben incrementarse en un 30%, y en un sistema de 200 mm. en un 100%.

Con muestras más grandes la fuerza debe ser incrementada, con muestras más pequeñas disminuida.

Los tiempos y las fuerzas pueden variar en función del equipo.

Representante Exclusivo

México: (-52) 55-5300-4517 Qro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251,
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-418-1443, 222-228-1633