

Aka-Brief # 16 Materiales Medio Blandos 150-400 HV

1




Piatto 220



Agua



300 rpm

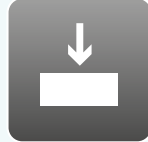

35 N




Hasta planitud



Se indican tiempos para un sistema de preparación de 300 mm. y una muestra individual de diámetro 40 mm.

2

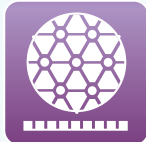

Allegran 3



DiaMaxx
Poly 6 µm



150 rpm



35 N



5:00 min



En un sistema de 250 mm. los tiempos deben incrementarse en un 30%, y en un sistema de 200 mm. en un 100%.

Con muestras más grandes la fuerza debe ser incrementada, con muestras más pequeñas disminuida.

3



Napal



DiaMaxx
Poly 1 µm



150 rpm



30 N



4:00 min



Los tiempos y las fuerzas pueden variar en función del equipo.

* Material preparado:
Acero Blando